

# PRACTICO™

Manuellt operationsbord

---

För allmän och  
specialiserad kirurgi

OPERATIONSSAL



## Brett utbud av konfigurationer för olika kirurgiska ingrepp

Det nya hydrauliska Practico-bordet är en mångsidig, manuellt driven bordsmodell vars många inställningar möjliggör allmän- och specialkirurgi på platser som saknar elektricitet.

Operationsbordet klarar även tyngre patienter och ger en utmärkt åtkomst av ingreppsstället tack vare dess utformning och justeringsmöjligheter.

Dessutom gör den rostskyddade bänken operationsbordet lämpligt för krävande väderförhållanden.

Omvänt chockläge



## Funktioner



Chockläge





Reflex



Flex



Gasfjäderassisterad sidolutning

## En mängd fördelar för operationsteamet

- Utmärkt åtkomst till patienten för hela operationsteamet
- Mångsidig – använd samma bord för många olika typer av ingrepp
- Kortare operationstider tack vare enkel inställning
- Kompatibel med många av tillbehören och toppsektionerna till andra Merivaara-bord (Practico, elektromekaniska och Promerix)
- C-arm- och röntgenkompatibel
- Lämplig för fuktig väderlek tack vare korrosionsfritt material

## Funktioner

Delade bensektioner  
(tillvalstillbehör)



Lättviktiga fotstöd som används vid  
inställning (tillvalstillbehör)



Hydraulisk höjjustering

# Patientpositioner



Sidoläge med flex eller njurbrygga för njur-/bröstkorgskirurgi.



Sidoläge för allmän kirurgi utan njurbrygga.



Omvänt läge för allmän eller ÖNH-kirurgi



Liggande läge för allmän kirurgi

## Patientpositioner



Litotomiposition med byglar och benstöd för exempelvis gynekologisk och urologisk kirurgi



Litotomiposition med delade bensektioner för exempelvis laparoskopisk och bariatrisk kirurgi



Ortopedisk förlängningsenhet 19300 för traumakirurgi

Mer information om konfigurationer och tillbehör finns på [www.merivaara.com](http://www.merivaara.com). Du kan även kontakta din närmaste Merivaara-representant, kontaktinformation finns på webbplatsen.

Unikt för  
Merivaara!



Sektionerna kan enkelt tas loss tack vare mekanismen för snabbkoppling.

## Tekniska specifikationer

Bänk	4-5
Säker arbetsbelastning (SWL)	180 kg

### JUSTERINGSINTERVALL

Höjd	Hydraulisk
Sidolutning	± 20°
Chockläge	25°
Omvänt chockläge	18°
Ryggsektion	-30°...+70°
Bensektion	-90°...+15°

### JUSTERINGAR

Rygg- och bensektion, sidolutning och chockläge	Mekanisk, gasfjäderassisterad
---	-------------------------------

Mer information och möjliga uppdateringar finns på [www.merivaara.com](http://www.merivaara.com).

- EN 60601-1, EN 60601-2-46 (då det är tillämpligt)
- Practico manual har klassificerats som en medicinteknisk produkt av klass I enligt Europarådets direktiv 93/42/EEG Klass I (Bilaga IX)



Finns med VEF- eller IS-madrass


# Lösningar för effektivt fysiskt patientflöde och välbefinnande

Merivaara tillhandahåller ett brett urval av sjukhusmöbler, till exempel operationsbord, medicinsk belysning, undersökningsbord, vagnar och bårar för transport och dagkirurgi, liksom förlossnings- och patientsängar. Dessutom omfattar våra nya koncept både revolutionerande integrerade ledningssystem och service efter försäljning.

Våra mångsidiga lösningar och vårt produktutbud möjliggör ett bekvämt och kostnadseffektivt fysiskt patientflöde på sjukhus, dagkirurgi- och hälsokliniker, samt på vårdhem och inom hemvården. Vi strävar efter att förbättra komforten och välbefinnandet både för patienter och vårdpersonal.

Merivaara grundades år 1901 i Finland och har därmed över 100 års erfarenhet av design och tillverkning av sjukhusmöbler. Idag är våra produkter mycket uppskattade av användare i över 120 länder tack vare sin användarvänliga, hållbara och ergonomiska design.

Merivaaras medicinska produkter är CE-märkta och företagets kvalitetsledningssystem uppfyller EU-direktiv för medicintekniska produkter. Det är certifierat av DNV enligt standarderna ISO 9001:2008 och ISO 13485:2003. Företagets miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 14001:2004.

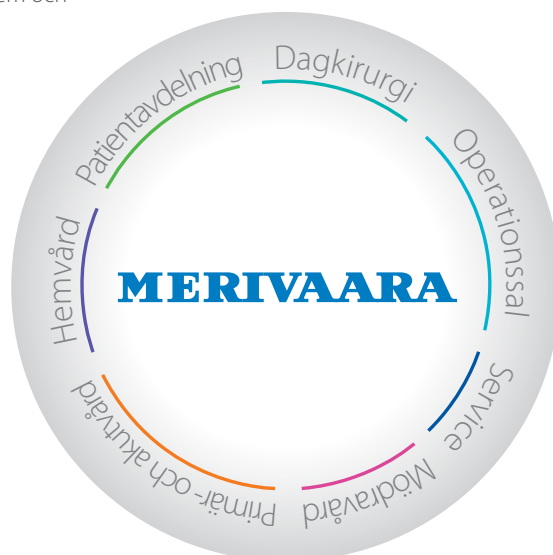

**Merivaara AB**  
Karlsbodavägen 41  
P.O.Box 20126, S-161 02 Bromma, Sverige  
Tel +46 8 6272950  
info@merivaara.se  
www.merivaara.se

Status för informationen, specifikationerna och illustrationerna i denna publikation anges av publiceringsdatumet. Största möjliga noggrannhet har tillämpats vid författandet och Merivaara Corp. ansvarar inte för eventuella fel eller utelämnningar. Merivaara Corp. förbehåller sig rätten att ändra tekniken, funktionerna, specifikationerna och designen för utrustningen och modellerna utan föregående meddelande. De senaste uppdaterade specifikationerna och övrig information finns på Merivaaras webbplats.

Alla varumärken tillhör Merivaara om inte annat anges. Patent innehas eller har sökts.